

OMNIPOST & SSA-GF*

UNA GUARIGIONE SU MISURA

Semplica i protocolli

Rispetta la biologia

Migliora la qualità percepita dal paziente




BIOTECH DENTAL

*Sealing Socket Abutment - Gingival Fit / Monocone per
chiusura alveolare - condizionamento gengivale

MONCONE OMNIPOST


UN MONCONE CHE
RISPONDE ALLE
ATTUALI ESIGENZE
BIOLOGICHE,
ESTETICHE E
FUNZIONALI

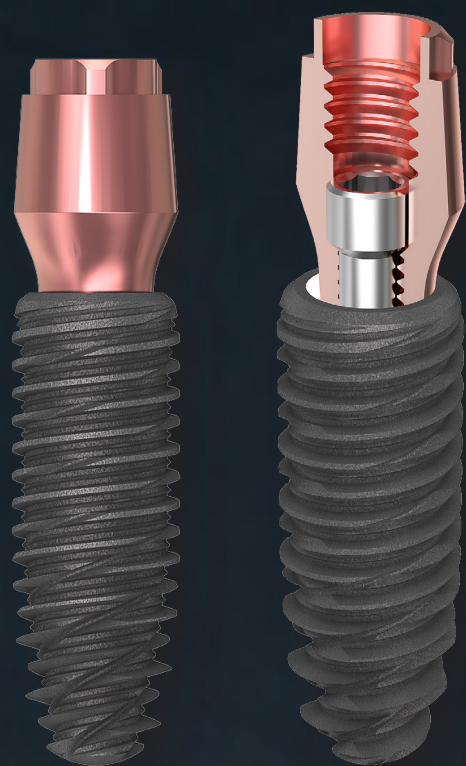

Un moncone protesico «ONE ABUTMENT - ONE TIME*»

- ✓ **Risponde ai principi biologici del « One Abutment - One Time* »** : il moncone viene posizionato il giorno dell'intervento ed è destinato a rimanere in sede fino al restauro definitivo così da evitare il danneggiamento dello spazio biologico.
- ✓ Permette di realizzare **protesi avvitate o telescopiche**, singole o multiple.
- ✓ **Le ridotte dimensioni** della parte profonda rispettano la biologia peri-implantare.

*Un moncone, una seduta

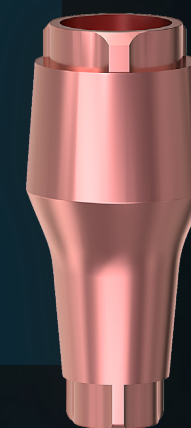

Numerosi vantaggi



BIOLOGICI

- Protezione dello spazio biologico
- Rispetto dei tessuti peri-implantari



ESTETICI

Moncone OmniPost anodizzato color rosa per una miglior integrazione estetica.



PROTESICI

Moncone multifunzionale: protesi avvitata o telescopica.


CAPPETTE ANATOMICHE

SU MONCONE OMNIPOST



UNA SOLUZIONE PER UNA GUARIGIONE ANATOMICA ANCHE DIGITALE

E' un pilastro di guarigione concepito per permettere un flusso digitale ottimale fungendo anche da scanbody.


UNIVERSALE

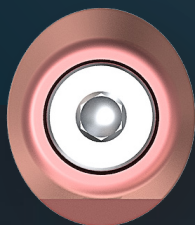

MOLARE MASCELLARE

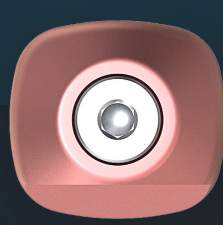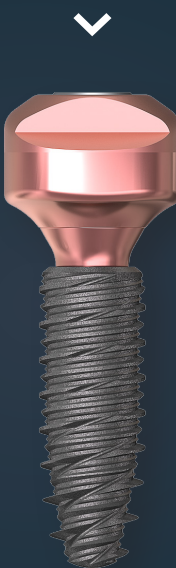

MOLARE MANDIBOLARE

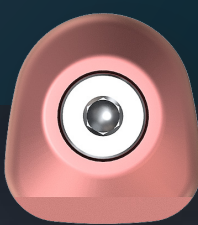

Le cappette anatomiche sono:

✓ ANATOMICHE

Disponibili oggi in tre morfologie:

- Universale
- Molare mandibolare
- Molare mascellare

La loro forma permette di creare un profilo di emergenza anatomico dal moncone OmniPost.

✓ SCANSIONABILI

La cappetta di guarigione potrà essere **scannerizzata direttamente** per ottenere un'impronta digitale.

 **Verrà riconosciuta da qualsiasi telecamera intraorale.**

E' possibile anche realizzare un'impronta fisica direttamente sulla cappetta o con un transfer (pick up o pop up) con una metodica tradizionale.



✓ AVVITATE

Le cappette avvitate sul moncone OmniPost permettono di rispettare il concetto « One Abutment - One Time »*.

✓ BIOCOMPATIBILI - IN TITANIO

Permettono di garantire una biocompatibilità della componentistica con i tessuti peri-implantari.

*Un moncone, una seduta




Indicazioni per il sistema OmniPost:

Le cappette di guarigione saranno utilizzabili in un primo o secondo tempo chirurgico, prevalentemente nei settori posteriori, e in alcuni casi di impianti post-estrattivi immediati.

UN RISPARMIO DI TEMPO PER IL PAZIENTE E PER IL DENTISTA

FASI SEMPLIFICATE E PIU' BREVI

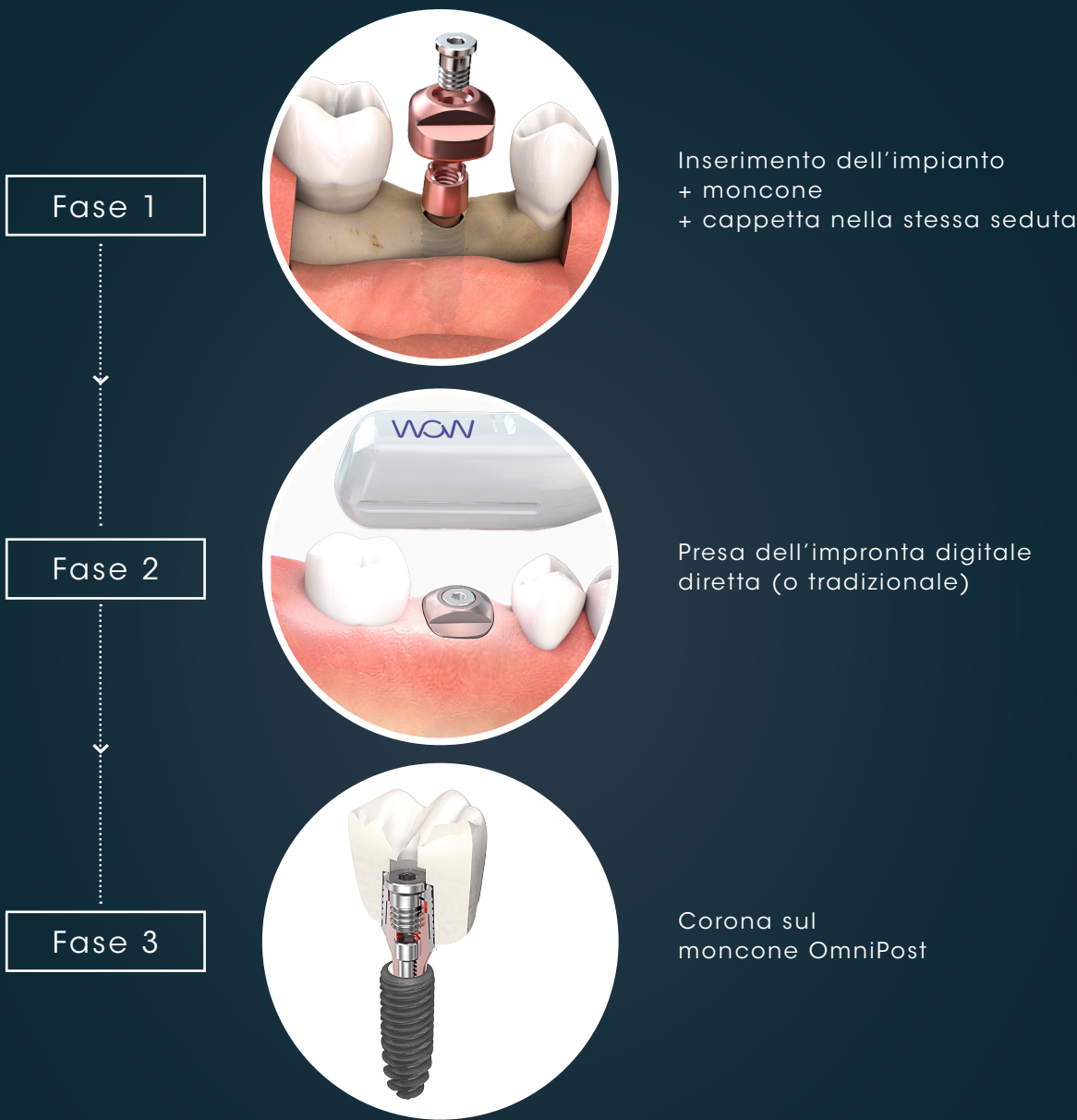

UN CONFORT OTTIMALE PER IL PAZIENTE



Un confort per il paziente grazie alla riduzione del numero di sedute e una procedura che determina una miglior guarigione dei tessuti molli peri-implantari.



Un sistema innovativo che combina un moncone protesico unico e cappette di guarigione anatomiche. Il concetto OmniPost, insieme alle soluzioni digitali, garantisce un profilo di emergenza naturale e la stabilità dei tessuti molli per risultati biologici ed estetici duraturi.

Dott. Marco Morello
Chirurgo dentale

SOLUZIONE SSA-GF* GINGIVAL FIT*

UN MONCONE DI GUARIGIONE SU MISURA
ANATOMICO, PESONALIZZABILE
E DIGITALE PER GLI IMPIANTI
POST-ESTRATTIVI IMMEDIATI

Il "Sealing Socket Abutment"*** è un moncone di
guarigione **anatomico** e **personalizzabile** realizzato su
misura al momento dell'inserimento dell'impianto post-
estrattivo immediato per chiudere l'alveolo.
Viene utilizzato principalmente nel settore posteriore.

Infinite possibilità di
personalizzazione

Immediato

Percezione
del paziente

Scansionabile

Migliorare

Semplificare

Rispettare



Biocompatibilità
PEEK

Atraumatico

Stabilità
ossea

*Sealing Socket Abutment - Gingival Fit / Moncone per
sigillare l'alveolo - condizionamento gengivale
**Moncone per sigillare l'alveolo

UNA RIVOLUZIONE PER L'IMPLANTOLOGIA POST-ESTRATTIVA IMMEDIATA NEL SETTORE POSTERIORE

SEMPLIFICAZIONE del protocollo implantare

✓ PROCEDURA CHIRURGICA SEMPLIFICATA

- Nessun lembo e nessuna incisione di scarico
- Nessuna sutura
- Nessuna membrana
- Si evita una guarigione primaria disorganizzata dei tessuti molli

✓ COMPONENTI ANATOMICHE E PERSONALIZZABILI

Le forme delle componenti SSA-GF* sono state ideate per corrispondere al meglio alle diverse forme degli alveoli. Questa componente potrà essere personalizzata tramite l'aggiunta di composito per corrispondere al contorno gengivale del dente estratto.

✓ GAMMA E STOCCAGGIO OTTIMIZZATI

Il numero di componenti necessario per gestire tutte le situazioni cliniche è ottimizzato per gestire al meglio il magazzino.

✓ MONCONE DIRETTAMENTE SCANSIONABILE

Le cappette SSA-GF* presentano una superficie piana che permette la presa diretta dell'impronta. L'impronta può essere realizzata con la tecnica tradizionale.



* Sealing Socket Abutment - Gingival Fit / Moncone per sigillare l'alveolo - condizionamento gengivale

RISPETTO

✓ PROFILO DI EMERGENZA ADATTATO

La forma stretta del moncone SSA-GF* nella zona transmucosa rispetta l'integrità dello spazio biologico peri-implantare.

✓ STABILITA' OSSEA

Il principio è quello di mantenere al massimo il volume osseo iniziale e di evitare le perdite di osso per ottimizzare l'estetica.

✓ RISPOSTA BIOLOGICA OTTIMIZZATA

- Procedura minimamente invasiva
- Stabilità del coagulo sanguigno
- Emergenza anatomica
- Stabilità dei tessuti molli


✓ SUPERFICIE BIOCOMPATIBILE IN PEEK

Le cappette anatomiche SSA-GF* sono realizzate in PEEK, materiale conosciuto per le sue proprietà biocompatibili, per stimolare la risposta cicatriziale e ridurre l'infiammazione dei tessuti molli peri-implantari.

* Sealing Socket Abutment - Gingival Fit / Moncone per sigillare l'alveolo - condizionamento gengivale

MIGLIORAMENTO dell'esperienza del dentista e paziente

✓ RIDUZIONE DEL NUMERO DI SEDUTE PER IL PAZIENTE

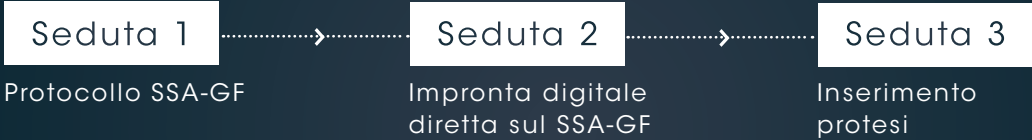

✓ RIDUZIONE DELLA DURATA TOTALE DEL TRATTAMENTO

Il tempo di trattamento è dimezzato rispetto ai trattamenti tradizionali (dove l'impianto viene posticipato dopo l'estrazione).


✓ RIDUZIONE DEI PROBLEMI POST-OPERATORI

SOLUZIONE « IMPIANTI SOTTOCRESTALI* » KONTACT™
SSA-GF** SU MONCONE OMNIPOST



- ✓ One Abutment - One Time***
- ✓ Anatomico
- ✓ Personalizzabile
- ✓ Stock ottimizzato di tre cappette SSA-GF
- ✓ Scansionabile
- ✓ Compatibile con tutta la gamma Kontakt™

SOLUZIONE « KONTACT™ PERIO LEVEL »
SSA-GF* IMPIANTO DIRETTO

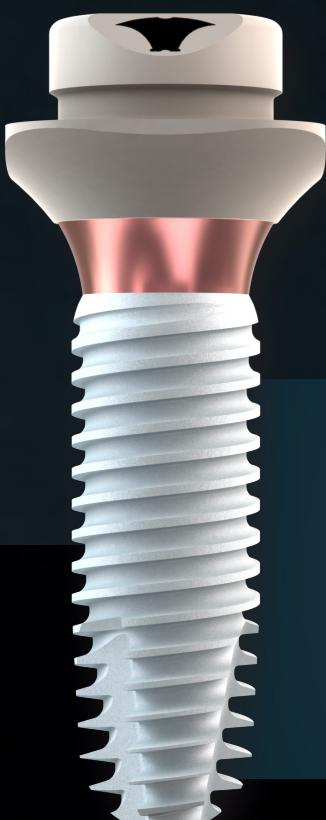


- ✓ Soluzione su impianto « Tissue-level** »
- ✓ Anatomico
- ✓ Personalizzabile
- ✓ 3 morfologie
- ✓ Diverse altezze gengivali disponibili
- ✓ Scannerizzabile



* Infra-osseo
** Sealing Socket Abutment - Gingival Fit / Moncone per sigillare l'alveolo - condizionamento gengivale
*** Un moncone, una seduta
* Sealing Socket Abutment - Gingival Fit / Moncone per sigillare l'alveolo - condizionamento gengivale
** A livello tissutale


Le cappette SSA-GF* OmniPost sono
**adatte a tutti gli impianti
della gamma Kontakt™:**

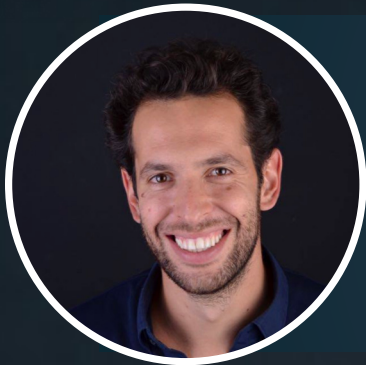

“Con la sua personalizzazione illimitata, SSA-GF apre le porte a un’implantologia immediata, microinvasiva e più che mai focalizzata sul comfort del paziente.”

Dott Gary Finelle
Chirurgo dentale


* Sealing Socket Abutment - Gingival Fit / Moncone per sigillare l'alveolo – condizionamento gengivale

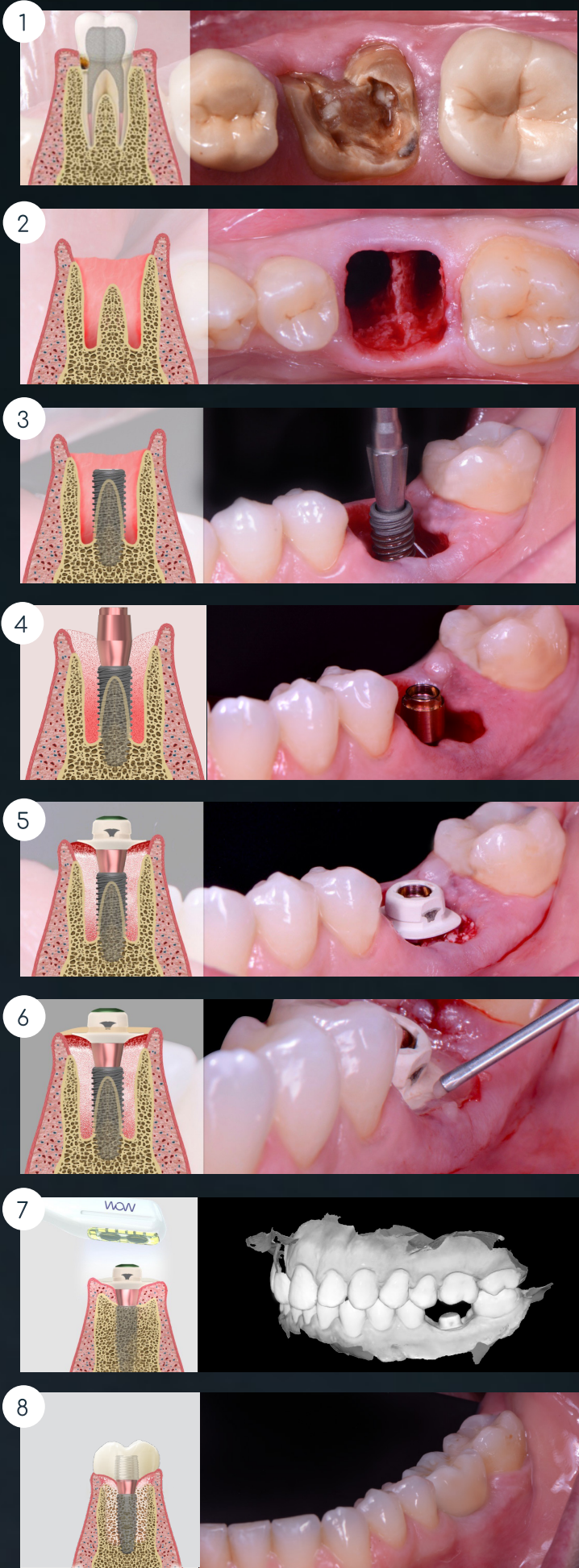

PROTOCOLLO

SSA-GF* SU MONCONE
OMNIPOST

Il **SSA-GF*** permetterà di **personalizzare** la guarigione con l'aiuto delle cappette SSA-GF. Grazie alla superficie **sabbiata in PEEK**, la cappetta SSA-GF può essere adattata con del composito. Questo materiale fluirà nell'alveolo dentale per mantenere il volume dell'osso.

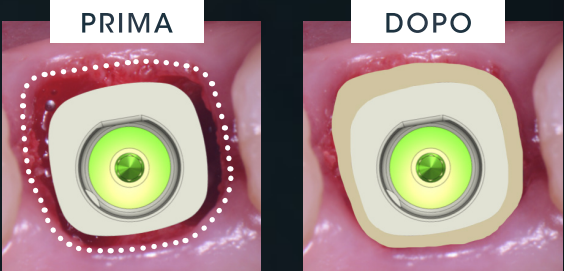


* Sealing Socket Abutment - Gingival Fit / Moncone per sigillare l'alveolo – condizionamento gengivale

CODICI DISPONIBILI
PER LA GAMMA OMNIPOST




CODICI OMNIPOST

MONCONI OMNIPOST



Monconi OmniPost indicizzati dritti

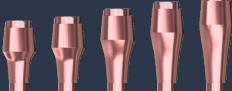	Codici	Descrizione	Angolazione	Altezze
	KPOP150	Monconi OmniPost dritti + vite KVP	0°	1.5 mm
	KPOP200			2 mm
	KPOP300			3 mm
	KPOP400			4 mm
	KPOP500			5 mm

Monconi OmniPost indicizzati angolati

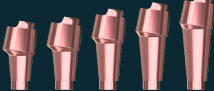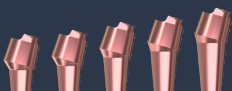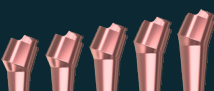
	Codici	Descrizione	Angolazioni	Altezze
	KPOPA75150	Monconi OmniPost indicizzati angolati + vite KVP	7,5°	1.5 mm
	KPOPA75200			2 mm
	KPOPA75300			3 mm
	KPOPA75400			4 mm
	KPOPA75500			5 mm
	KPOPA150150	Monconi OmniPost indicizzati angolati + vite KVP	15°	1.5 mm
	KPOPA150200			2 mm
	KPOPA150300			3 mm
	KPOPA150400			4 mm
	KPOPA150500			5 mm
	KPOPA200150	Monconi OmniPost indicizzati angolati + vite KVP	20°	1.5 mm
	KPOPA200200			2 mm
	KPOPA200300			3 mm
	KPOPA200400			4 mm
	KPOPA200500			5 mm

Monconi OmniPost non indicizzati angolati

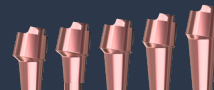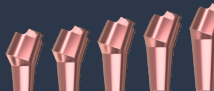	Codici	Descrizione	Angolazioni	Altezze
	KPOPA75150NI	Monconi OmniPost non indicizzati angolati + vite KVP	7,5°	1.5 mm
	KPOPA75200NI			2 mm
	KPOPA75300NI			3 mm
	KPOPA75400NI			4 mm
	KPOPA75500NI			5 mm
	KPOPA150150NI	Monconi OmniPost non indicizzati angolati + vite KVP	15°	1.5 mm
	KPOPA150200NI			2 mm
	KPOPA150300NI			3 mm
	KPOPA150400NI			4 mm
	KPOPA150500NI			5 mm
	KPOPA200150NI	Monconi OmniPost non indicizzati angolati + vite KVP	20°	1.5 mm
	KPOPA200200NI			2 mm
	KPOPA200300NI			3 mm
	KPOPA200400NI			4 mm
	KPOPA200500NI			5 mm

CAPPETTE DI GUARIGIONE ANATOMICHE

Cappette di guarigione anatomiche OmniPost

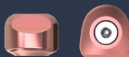	Referenze	Descrizioni
	KPOPCC	Cappetta di guarigione OmniPost + vite KPOPVCTV
	KPOPCCMD	Cappetta di guarigione molare mandibolare OmniPost + vite KPOPVCTV
	KPOPCCMX	Cappetta di guarigione molare mascellare OmniPost + vite KPOPVCTV

CODICI DISPONIBILI PER LA GAMMA
SSA-GF *

CODICI SSA-GF *

CAPPETTE SSA-GF *

Cappette di guarigione anatomiche SSA-GF *

	Codici	Descrizione
	KPOPSSA	Cappetta SSA-GF per moncone OmniPost + vite KPOPVSSA
	KPOPSSAMD	Cappetta SSA-GF molare mandibolare per moncone OmniPost + vite KPOPVSSAMD
	KPOPSSAMX	Cappetta SSA-GF molare mascellare per moncone OmniPost + vite KPOPVSSAMX

MONCONI SSA-GF *

Monconi SSA-GF * per impianto Kontakt™ Perio Level

	Codici	Descrizione	Diametro del collo	Altezze
Universale		Moncone SSA-GF + vite KPLVP	S	2 mm
		Moncone SSA-GF + vite KPLVP	M	2 mm
Mandibolare		Moncone SSA-GF per molare mandibolare + vite KPLVP	L	1 mm
		Moncone SSA-GF per molare mandibolare collo L Alt. 2 mm + vite KPLVP		2 mm
		Moncone SSA-GF per molare mandibolare + vite KPLVP	XL	1 mm
		Moncone SSA-GF per molare mandibolare collo XL Alt. 2 mm + vite KPLVP		2 mm
Mascellare		Moncone SSA-GF per molare mascellare + vite KPLVP	L	1 mm
		Moncone SSA-GF per molare mascellare collo L Alt. 2 mm + vite KPLVP		2 mm
		Moncone SSA-GF per molare mascellare + vite KPLVP	XL	1 mm
		Moncone SSA-GF per molare mascellare collo XL Alt. 2 mm + vite KPLVP		2 mm

*Sealing Socket Abutment - Gingival Fit / Moncone per sigillare l'alveolo - condizionamento gengivale

CODICI DISPONIBILI PER LA GAMMA
OMNIPOST & SSA-GF *

CODICI OMNIPOST & SSA-GF *

COMPONENTISTICA Componentistica protesica

	Codici	Descrizione
	KPOPCT	Cappetta telescopica OmniPost
	KPOPCTNI	Cappetta telescopica non indicizzata OmniPost
	KPOPCTV	Cappetta avvitata OmniPost + vite KPOPVCTV
	KPOPCTVNI	Cappetta avvitata non indicizzata OmniPost + vite KPOPVCTV
	KPOPVCTV	Vite di fissaggio per cappetta OmniPost
Transfert pick up & pop up OmniPost / Analoghi & scanbody OmniPost		
	KPOPTPI	Transfer pick up OmniPost + vite KPOPVTPI
	KPOPVTPI	Vite per transfer pick up OmniPost
	KPOPTPO	Transfer pop up OmniPost + 1 vite KPOPVTPO
	KPOPVTPO	Vite per transfer pop up OmniPost
	KDOP	Analoghi di moncone OmniPost
	KPOPSCANP	Cappetta per scansione in PEEK per moncone OmniPost
	KPOPVCTVL	Vite da laboratorio per cappetta OmniPost

Bibliografia

Titane Vol. 13 - N°4 - Décembre 2016 - Pilier de cicatrisation anatomique par CFAO directe **(SSA)** pour la réhabilitation molaire par traitement d'extraction et implantation immédiate - G. Finelle & A. Popelut

JOMI - Avril 2017 - Computer assisted immediate implant placement and wound closure : CAD-CAM sealing socket abutment technique. A case report - G. Finelle & S. Lee

JPIO Vol. 35 - N°4 - Protocole d'extraction implantation immédiate : intérêt de l'utilisation de piliers de cicatrisation anatomique conçus par CFAO - G. Finelle & A. Popelut

JOMI - Preservation of Soft Tissue Contours Using Computer-Aided Design/Computer-Assisted Manufacturing Healing Abutment with Guided Surgery in the Esthetic Area: Case Report - Simon Doliveux, Faris Z. Jamjoom, Gary Finelle, Adam Hamilton, German O. Gallucci

International Journal of Computerized Dentistry - 2019 - Digitalized CAD/CAM protocol for the fabrication of customized sealing socket healing abutments in immediate implants in molar sites - Gary Finelle, Ignacio Sanz-Martín, Bryan Knafo, Maxime Figué, Antoine Popelut

L'Information Dentaire n° 4- 29 janvier 2020 - L'extraction implantation immédiate en secteur postérieur associée à la mise en œuvre du pilier SSA - Gary Finelle & Raoul Martin

Titane - 2020 - Procédés de fabrication des piliers de cicatrisation anatomique SSA- Gary Finelle

*Sealing Socket Abutment - Gingival Fit / Moncone per sigillare l'alveolo - condizionamento gengivale



BIOTECH DENTAL
ITALIA



Biotech Dental Italia
Viale degli olmi, 14
84 134 Salerno - Italia

Tel.: +39 089 9712629
Fax: +39 089 9712666

info@biotech-dental.it
www.biotech-dental.it



Prodotto da: Biotech Dental.

Biotech Dental - S.A.S au capitale de 24 866 417 € - RCS Salon de Provence : 795 001 304 - SIRET : 795 001 304 00018 - N° TVA : FR 31 79 500 13 04.

Dispositivi medicali di classe I, IIa e IIb destinati all'implantologia dentale.CE0459. Leggere attentamente le istruzioni sul foglietto illustrativo.

Non rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale. Immagini non contrattuali. Smaltire con i rifiuti speciali.

Stampa eseguita da VALLIERE - 163, Avenue du Luxembourg - ZAC des Molières - 13140 Miramas-Francia.