

Kontakt™ MB

MONOBLOCCO

Ottimizzare lo spazio biologico
e preservare il complesso
osteo-mucoso

BONE & TISSUE LEVEL CONCEPT *



BIOTECH DENTAL

* Concetto che combina le caratteristiche e i vantaggi degli impianti in 1 e 2 pezzi.

1

UN IMPIANTO MONOBLOCCO INNOVATIVO CON UNA FORTE EREDITÀ

L'impianto monoblocco Kontakt™ MB presenta un design del corpo fortemente ispirato all'iconico impianto Kontakt™. Presenta anche le stesse caratteristiche e vantaggi per favorire una risposta ottimale dell'osso e della mucosa.





✓ Connessione esterna con moncone conico integrato (MUA*) con una resistenza meccanica ottimale per una protesi avvitata

L'impianto Kontakt™ MB è dotato di **un moncone conico universale integrato con un diametro standard per protesi avvitata. Il concetto Monoblocco senza giunzione impianto/moncone evita di rovinare lo spazio biologico durante lo svitamento e il riavvitamento durante le fasi protesiche.** Tutti i tipi di strutture possono essere lavorati in diversi centri di lavoro e di realizzare delle correzioni d'asse.



✓ Design e superficie implantare performanti

- Il Kontakt™ MB è un impianto **cilindro-conico in titanio di grado 4 (T60)** dotato di una **superficie sabbiata mordenzata** con base filettata regressiva a scopo di compressione. Queste caratteristiche gli permettono di assicurare una **stabilità primaria** e un'**osteointegrazione ottimali**.
- **Possibilità di un diametro molto stretto:** l'assenza di una vite interna nel corpo dell'impianto consente di ottenere un diametro progettato per creste strette, che limiterà gli innesti ossei.



✓ Collo concavo anodizzato in rosa e platform switching

Anodizzato in rosa, fornisce una **migliore integrazione estetica**. Il design concavo **ottimizza lo spazio biologico** e favorisce l'ispessimento dei tessuti molli. L'assenza di un micro-gap impedisce l'infiltrazione batterica e l'infiammazione. L'offset laterale del collo, simile alla platform switching favorisce la ritenzione o l'aumento dell'osso al livello del primo BIC (Bone Implant Contact)**. La conicità inversa del collo dell'impianto riduce la compressione dell'osso crestale. Queste diverse caratteristiche consentono di posizionare il collo in posizione accostata o sottocrestale.



✓ Apice sferico atraumatico

Grazie al suo design, l'apice protegge la struttura anatomica al momento dell'intervento chirurgico e permette una subperforazione per un'osteotomia meno invasiva.

*MUA: Multi-Unit Abutments - Moncone Multi Unit

**Bolle C, Gustin MP, Fau D, Exbrayat P, Boivin G et Grosgeat B. *Implant Dentistry* 2015;24:598-606.

2

SEMPLICITÀ E FLESSIBILITÀ DEL TRATTAMENTO

UNA SOLA E UNICA
CONNESSIONE PER TUTTA
LA GAMMA DI IMPIANTI
CONTACT™ MB

> **2 altezze gengivali:**




> **5 diametri di corpo:**



> **5 lunghezze:**

6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm

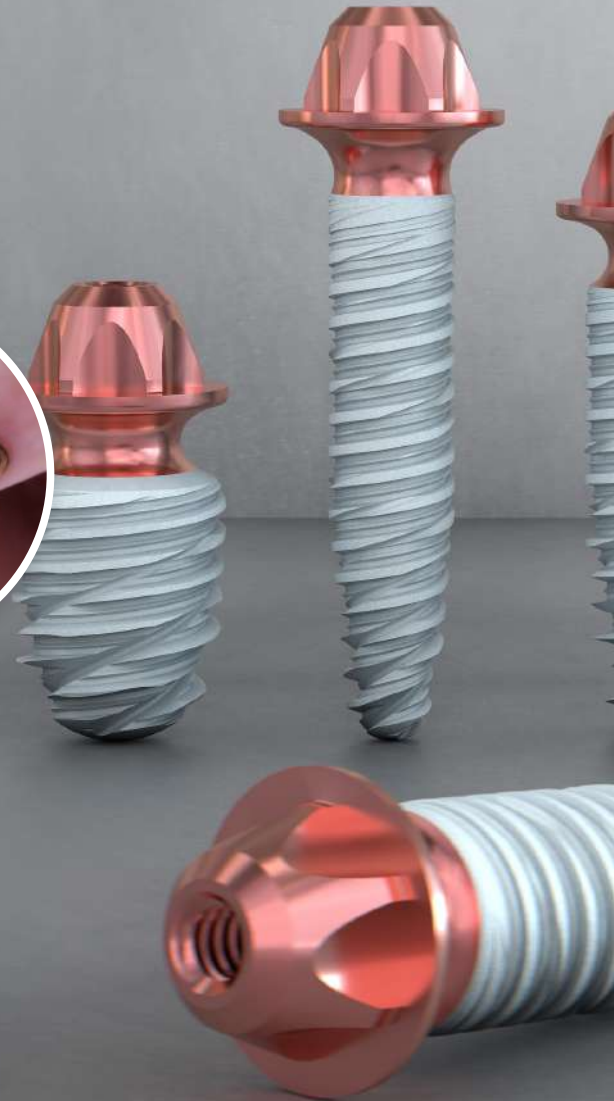



FAVORISCE L'ATTACCO DEI TESSUTI MOLLI, FACILITA LA GESTIONE PROTESICA

La **forma concava del collo** come anche la sua **superficie anodizzata** favoriscono un'aderenza ottimale, la stabilità e addirittura la crescita dei tessuti molli^{**}. La manipolazione protesica è facilitata grazie alla connessione esterna del tipo moncone conico (MUA^{*}).

PRINCIPI E VANTAGGI

Gli impianti Kontakt™ MB sono destinati a procedure chirurgiche in 1 fase e a restauri avvitati singoli o multipli. Il principio **BTLC** (Bone & Tissue Level Concept) del Kontakt™ MB unisce le caratteristiche e vantaggi degli impianti in 1 e 2 pezzi.

- ✓ **Preservazione dei tessuti molli** e dell'osso peri-implantari, grazie al design monoblocco e al suo collo transgingivale liscio combinato al platform switching.
- ✓ **Accessibilità e buona visibilità**, soprattutto nei settori posteriori, grazie alla connessione esterna moncone conico. **Il moncone e l'impianto in un unico pezzo consentono un risparmio di tempo chirurgico, una riduzione strumentale e una migliore ergonomia.**
- ✓ **Adattamento** alla maggior parte delle situazioni riabilitative in un'unica fase chirurgica grazie al suo design, alle sue dimensioni e alla sua superficie: restauri singoli/multipli o completi; in qualsiasi tipo di osso e sito (mascellare o mandibolare / regione anteriore o posteriore). Posa degli impianti post-estrattivi o in siti guariti con carico immediato o ritardato.
- ✓ **Favorevole** a una **buona stabilità primaria** grazie alla superficie microruvida e al macrodisegno.

*MUA: Multi-Unit Abutments - Moncone Multi Unit.

^{**}Agabiti I, Apaza Alccayhuaman KA, Nakajima Y, Botticelli D. An enigmatic soft tissue creeping phenomenon: The spontaneous peri-implant mucosa margin and papilla growth. A retrospective clinical study. Clin Exp Dent Res. 2020;1-10. <https://doi.org/10.1002/cre2.380>.


3

INTEGRA LA DIGITALIZZAZIONE IMPLANTARE NEL TUO FLUSSO DIGITALE

- ✓ **Ottimizza** il flusso digitale, la comunicazione con i pazienti e **accelera la pianificazione implantare** dei tuoi casi.
- ✓ **Facilita** la presa di impronta con uno scanner intraorale.
- ✓ **Utilizza** uno scanbody MUA* unico per tutti i diametri d'impianto.


Grazie allo scanbody, inserisci digitalmente la posizione, l'inclinazione e l'orientamento dell'impianto.

Questo permette la realizzazione di componenti protesici adatti alla morfologia del tuo paziente.

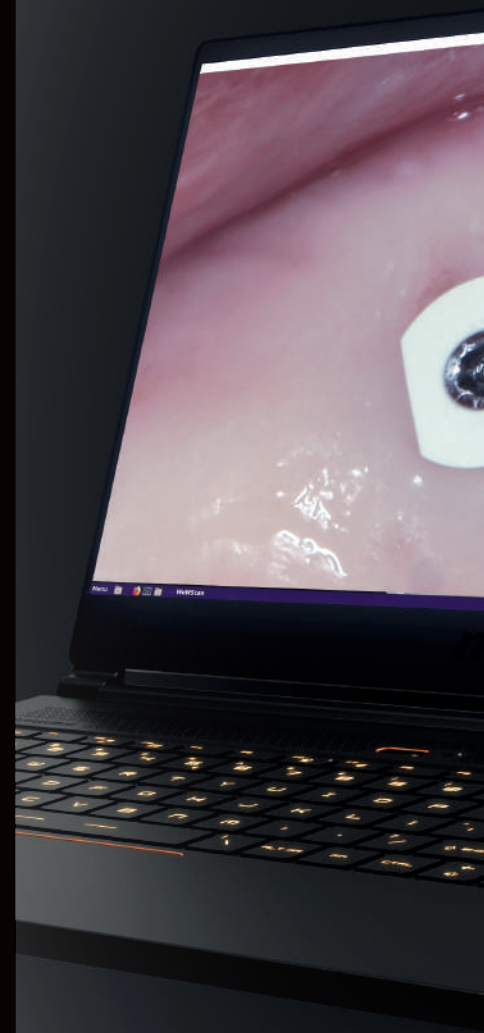

LA CHIRURGIA GUIDATA ACCESSIBILE A TUTTI

Biotech Dental associa la performance dell'impianto Kontakt™ MB alla tecnologia di NemoScan per consentirti **di accedere alla chirurgia guidata in tutta semplicità.**

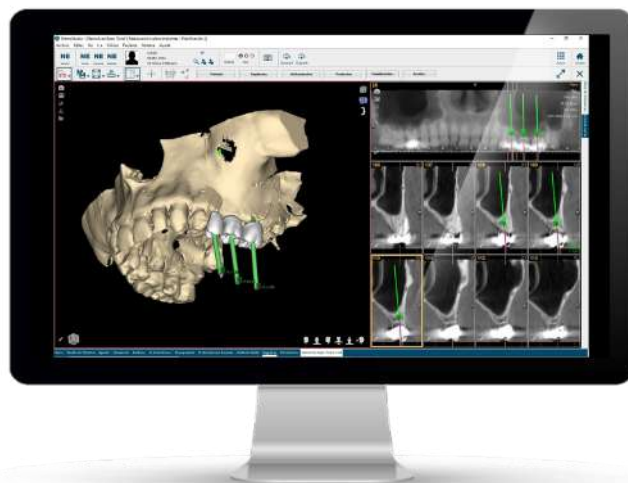

www.biotech-planningcenter.com

4

UN SOLO E UNICO KIT CHIRURGICO PER TUTTI GLI IMPIANTI DELLA GAMMA KONTACT™

Un kit ergonomico e semplice
che ti permette di inserire tutti gli
impianti della gamma Kontakt™.



5

UNA GAMMA DI PROTESI MUA* COMPATTA ED EFFICIENTE

✓ Realizzazione di una protesi avvitata

- Realizzazione di protesi singole MUA* grazie alle guaine indicizzate: provvisorie in PEEK, miste, in titanio, calcinabili.
- Realizzazione di protesi plurali su MUA* grazie alle guaine non indicizzate: calcinabili, miste, in titanio (eccetto impianti di diametro 2,75 mm)

✓ Presa d'impronta digitale o convenzionale a cielo aperto

✓ Protesi CAD-CAM

Realizzazione di tutti i tipi di protesi compatibili con MUA: Zirconia con e senza Tibase, Titanio, PMMA, CrCO.



LA GAMMA D'IMPIANTI KONTACT™ MB

Lunghezze (mm) / Altezze gengivali (mm)											
Ø corpo (mm)	6 / 1,8	6 / 2,8	8 / 1,8	8 / 2,8	10 / 1,8	10 / 2,8	12 / 1,8	12 / 2,8	14 / 1,8	14 / 2,8	
Ø 2,75											
			K2708-18MB	K2708-28MB	K2710-18MB	K2710-28MB	K2712-18MB	K2712-28MB	K2714-18MB	K2714-28MB	
Ø 3,6											
			K3608-18MB	K3608-28MB	K3610-18MB	K3610-28MB	K3612-18MB	K3612-28MB	K3614-18MB	K3614-28MB	
Ø 4,2											
	K4206-18MB	K4206-28MB	K4208-18MB	K4208-28MB	K4210-18MB	K4210-28MB	K4212-18MB	K4212-28MB	K4214-18MB	K4214-28MB	
Ø 4,8											
	K4806-18MB	K4806-28MB	K4808-18MB	K4808-28MB	K4810-18MB	K4810-28MB	K4812-18MB	K4812-28MB	K4814-18MB	K4814-28MB	
Ø 5,4											
	K5406-18MB	K5406-28MB	K5408-18MB	K5408-28MB	K5410-18MB	K5410-28MB	K5412-18MB	K5412-28MB	K5414-18MB	K5414-28MB	

NOTE



BIOTECH DENTAL



305, Allées de Craponne
13300 Salon-de-Provence - France
Tel.: +33 (0)4 90 44 60 60
Fax: +33 (0)4 90 44 60 61

CustomerCareService@biotech-dental.com
www.biotech-dental.com

www.biotechgalaxy.com



Consultare il manuale d'uso



Biotech Dental - 305, Allées de Craponne - 13300 Salon de Provence - Francia, S.A.S con capitale di 24 866 417 € - SIRET : 795 001 304 00018 - N° TVA : FR 31 79 500 13 04 - RCS Salon de Provence : 795001 304. KontaktTM / KontaktTM MB : prodotto da: Biotech Dental. Dispositivi medici (DM) di classe I, IIa e IIb. CE0459 - NemoScan: prodotto da Software Nemotec, S.L. DM Classe Im. CE2797. Tutti i marchi sono di responsabilità dei rispettivi produttori. Leggere attentamente le istruzioni sul foglietto illustrativo. Non rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale. Immagini non contrattuali. Non gettare in strada. Stampa eseguita da VALLIERE - 163, Avenue du Luxembourg - ZAC des Molières - 13140 MIRAMAS.