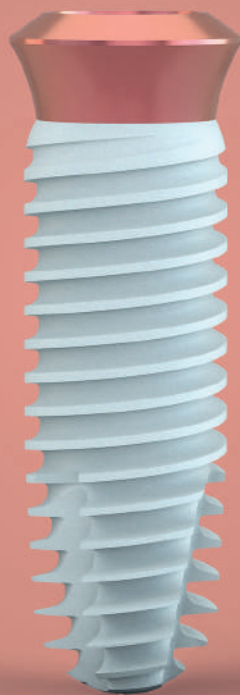


Kontakt™ PL

L'armonia perfetta
tra biologia ed esthetica



BIOTECH DENTAL

1

UN KNOW-HOW DI OLTRE TRENT'ANNI

Forte della sua esperienza ultratrentennale, Biotech Dental ha sviluppato l'impianto Kontakt™ Perio Level in collaborazione con professionisti del settore per rispondere alle più elevate esigenze cliniche, biologiche ed estetiche.



AFFIDABILITÀ E FLESSIBILITÀ MASSIME



✓ Collo transgingivale

Il Kontakt™ Perio Level è un impianto con collo transmucoso che facilita la chirurgia in un'unica fase. Anodizzato rosa, fornisce **una migliore integrazione estetica con il tessuto molle**.

Il collo transmucoso **riduce la complessità del trattamento e semplifica la manipolazione delle parti protesiche**. Inoltre, aiuta a **preservare la salute perimplantare**.



✓ Una connessione affidabile

- L'impianto Kontakt™ PL è dotato di una connessione conica. Grazie alla sua importante superficie di contatto, assicura una perfetta stabilità dei monconi protesici ed elimina i micromovimenti.
- L'indicizzazione brevettata STSystem® offre un'affidabilità e una sicurezza massime al momento dell'introduzione delle componenti protesiche con 3 vertici di indicizzazione alla base dei monconi e 6 possibilità di riposizionamento nell'impianto.



✓ Un design e una superficie dell'impianto performanti

Il Kontakt™ PL è un impianto **cilindro-conico** di grado 4 (T60) dotato di una superficie sabbiata mordenzata con un apice sferico e delle spire autofilettanti. Queste caratteristiche gli permettono di assicurare un'osteointegrazione e una stabilità primaria e secondaria ottimali.



✓ Apice sferico atraumatico

Grazie al suo design, l'apice protegge la struttura anatomica al momento dell'intervento chirurgico e permette un'osteotomia meno invasiva.

2

SEMPLICITÀ E FLESSIBILITÀ DEL TRATTAMENTO

UNA SOLA E UNICA CONNESSIONE
PER TUTTA LA GAMMA DI IMPIANTI
KONTACT™ PL

> **4 profili di collo:**

- S (ø 3.8 mm)
- M (ø 4.2 mm)
- L (ø 4.8 mm)
- XL (ø 6.00 mm)

> **3 diametri** di corpo implantare:

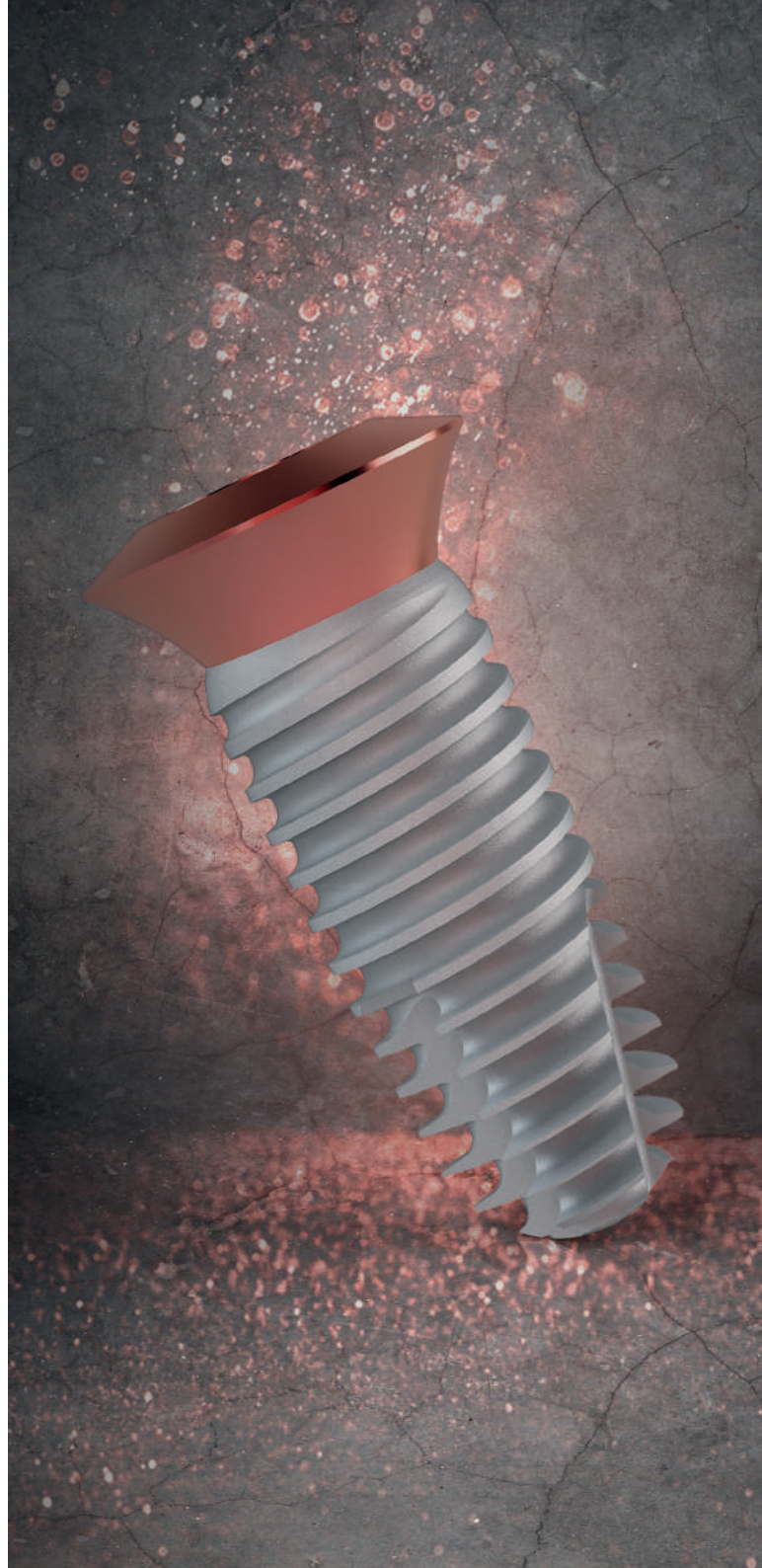


> **5 lunghezze:**

- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm

> **Altezza del collo 1.6 mm**

Possibilità di avere degli impianti a diametro ridotto (**4.2 mm**) con dei **profili di collo XL**.



FAVORIRE L'ATTACCO DEI TESSUTI MOLLI, OTTIMIZZARE L'ESTETICA

Il collo assicura una conservazione perfetta della gengiva. Grazie al suo design molto elaborato e alla sua superficie liscia, i tessuti molli si attaccano in modo ottimale e il deposito di placca dentale è limitato.

Il collo anodizzato rosa con un'altezza gengivale di 1.6 mm e varie larghezze (S, M, L, XL), a seconda dei diametri dell'impianto, risponde così alle più elevate esigenze cliniche ed estetiche.

PRINCIPI E VANTAGGI:

Le Kontakt™ PL è un impianto cilindrico conico con collo transmucoso che facilita la chirurgia one-step.

Presenta i seguenti vantaggi:

- ✓ **Semplificazione dei trattamenti implantari:** riducendo il numero di interventi chirurgici e rendendo più accessibili i trattamenti protesici e la manutenzione.
- ✓ **Rispetto dello spazio biologico:** la presenza della parte transgengivale e il suo design permettono di creare un profilo di emergenza ideale e di preservare l'ambiente peri-implantare.
- ✓ **Connessione STSystem® comune a tutti i diametri:** affidabile e intuitiva, la connessione STSystem® agevola la manipolazione protesica e la gestione delle stesse.
- ✓ **Stabilità primaria:** il design dell'impianto gli conferisce un potere autofilettante interessante in caso di impianto a carico immediato.

3

LA DIGITALIZZAZIONE IMPLANTARE NEL VOSTRO FLUSSO DIGITALE

- ✓ **Ottimizzate** il flusso digitale, la comunicazione con i pazienti e **accelerate la pianificazione** dei casi.
- ✓ **Facilitate** la presa di impronte con lo scanner intraorale WOW™.

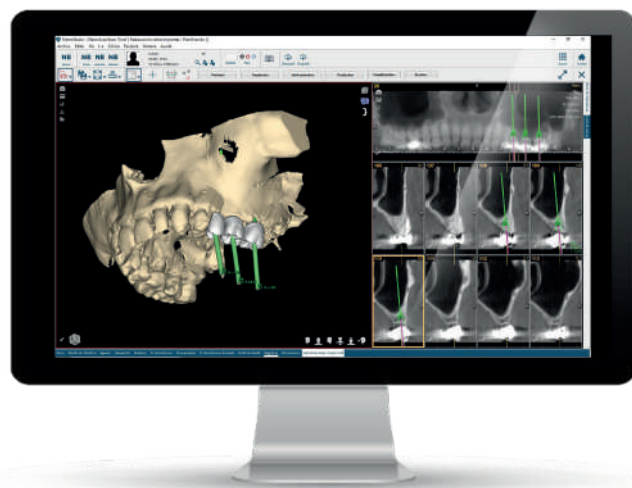
Grazie allo scanbody, inserite digitalmente la posizione, l'inclinazione e l'orientamento dell'impianto.

Questo permette la realizzazione di monconi e componenti protesici adatti alla morfologia del paziente.



L'ARTE DELLA CHIRURGIA GUIDATA ACCESSIBILE A TUTTI

Biotech Dental associa la performance dell'impianto Kontakt™ PL alla tecnologia di NemoScan per consentirvi **di accedere alla chirurgia guidata in tutta semplicità.**



www.biotech-planningcenter.com

4

UN SOLO E
UNICO KIT
CHIRURGICO PER
TUTTI GLI IMPIANTI
DELLA GAMMA
KONTACT™

Un kit ergonomico e semplice
che vi permette di inserire tutti gli
impianti della gamma Kontakt™.





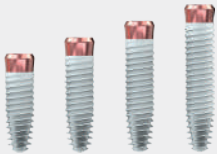
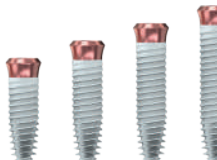
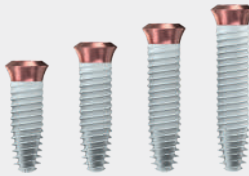
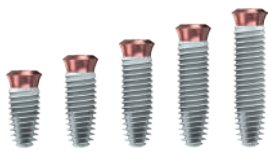
UNA GAMMA PROTESICA COMPLETA,
SVILUPPATA PER SEMPLIFICARE E OTTIMIZZARE
I RISULTATI ESTETICI



SOLUZIONI PROTESICHE IDEATE
PER TUTTE LE INDICAZIONI

- ✓ **Protesi cementata e avvitata**
- ✓ **Protesi amovibile**
- ✓ **Protesi CAD-CAM**
- ✓ **Monconi di guarigione anatomici,
personalizzabili e scansionabili SSA-GF***

* Sealing Socket Abutment - Gingival Fit /
Monconi per la chiusura della presa - regolazione gengivale.

	Codici	Descrizione	Diametro	Collo	Altezze
	K36S08PL	Impianti	Ø 3.6 mm	S	8 mm
	K36S10PL			S	10 mm
	K36S12PL			S	12 mm
	K36S14PL			S	14 mm
	K36M08PL	Impianti	Ø 3.6 mm	M	8 mm
	K36M10PL			M	10 mm
	K36M12PL			M	12 mm
	K36M14PL			M	14 mm
	K36L08PL	Impianti	Ø 3.6 mm	L	8 mm
	K36L10PL			L	10 mm
	K36L12PL			L	12 mm
	K36L14PL			L	14 mm
	K42L06PL	Impianti	Ø 4.2 mm	L	6 mm
	K42L08PL			L	8 mm
	K42L10PL			L	10 mm
	K42L12PL			L	12 mm
	K42L14PL			L	14 mm
	K42XL06PL	Impianti	Ø 4.2 mm	XL	6 mm
	K42XL08PL			XL	8 mm
	K42XL10PL			XL	10 mm
	K42XL12PL			XL	12 mm
	K42XL14PL			XL	14 mm
	K48XL06PL	Impianti	Ø 4.8 mm	XL	6 mm
	K48XL08PL			XL	8 mm
	K48XL10PL			XL	10 mm
	K48XL12PL			XL	12 mm
	K48XL14PL			XL	14 mm

NOTE



BIOTECH DENTAL
ITALIA



Viale degli olmi, 14
84 134 Salerno - Italia

Tel.: +39 089 9712629

Fax: +39 089 9712666

info@biotech-dental.it

www.biotech-dental.it

www.biotechgalaxy.com



AFNOR Cert. 73017

Biotech Dental - 305, Allées de Craponne - 13300 Salon-de-Provence, Francia.

S.A.S con capitale 24 866 417 € - RCS Salon de Provence: 795 001 304 - SIRET: 795 001 304 00018 - N° IVA: FR 31 79 500 13 04.

Kontakt™ PL: prodotto da Biotech Dental. Dispositivi medicali di classe I, IIa e IIb destinati all'implantologia dentale. CE0459.

WOW®: prodotto da Scan4all SAS. DM di classe I. CE - NemoScan: prodotto da Software Nemotec, S.L. DM di classe Im. CE2797.

Leggere attentamente le istruzioni sul foglietto illustrativo. Non rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale. Immagini non contrattuali.

Smaltire con i rifiuti speciali. Stampa eseguita da VALLIERE - 163, Avenue du Luxembourg - ZAC des Molières - 13140 Miramas - Francia.